




L'Open

La gamme Orchid Spec avec ouverture latérale, conçue pour les procédures d'hystérocopie, d'échographie et d'ablation, offre une grande marge de manœuvre en cas d'accès latéral. Cela permet un accès global amélioré. De plus, les instruments ou les tubulures peuvent être laissés en place, tandis que le spéculum est retiré pour le confort de la patiente.

Spéculum ouvert sur le côté

Permet de retirer facilement le spéculum tout en laissant les instruments ou les cathéters engagés dans le col de l'utérus.
Facilite l'accès à la paroi vaginale.

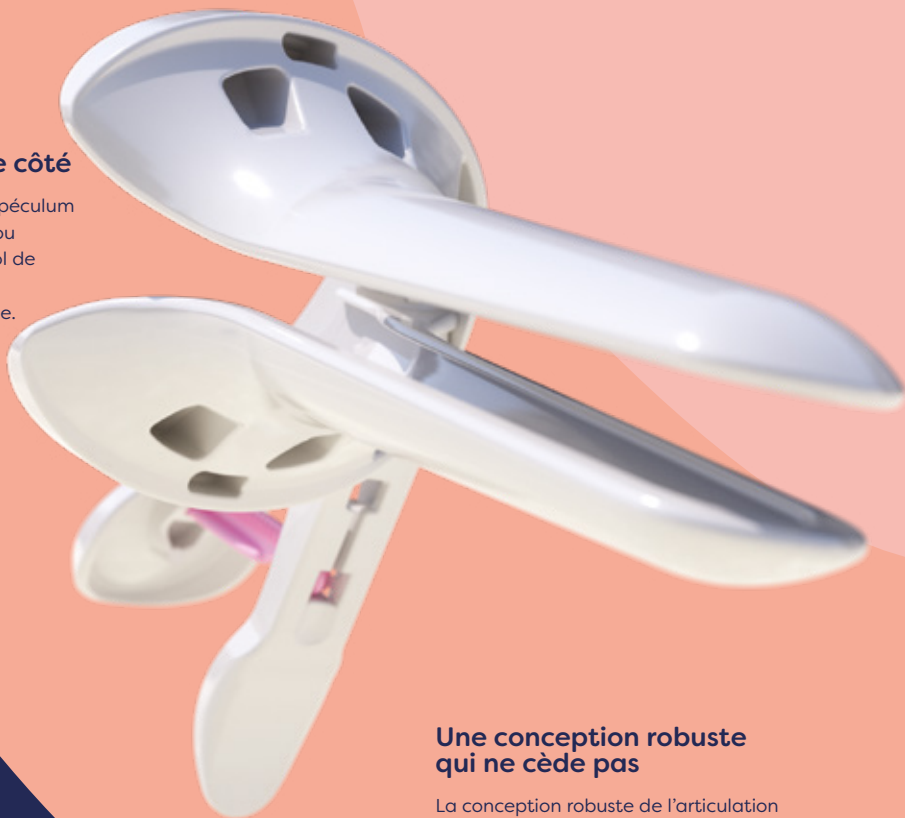

Idéal pour :

- Sonohystérocopie (SIS / GIS)
- Examens HyFoSy / HyCoSy
- Insertion de DIU
- Colposcopie
- Hystérocopie
- Examens HSG / THL
- Ablation de l'endomètre
- Accès aux parois latérales

Une conception robuste qui ne cède pas


La conception robuste de l'articulation et des valves permet une ouverture latérale spacieuse et stable, même en présence d'une charge importante.



Lauréat du prix red dot Product Design
à deux reprises (2013 et 2016).

A better speculum, a better practice, a better world

L'Open

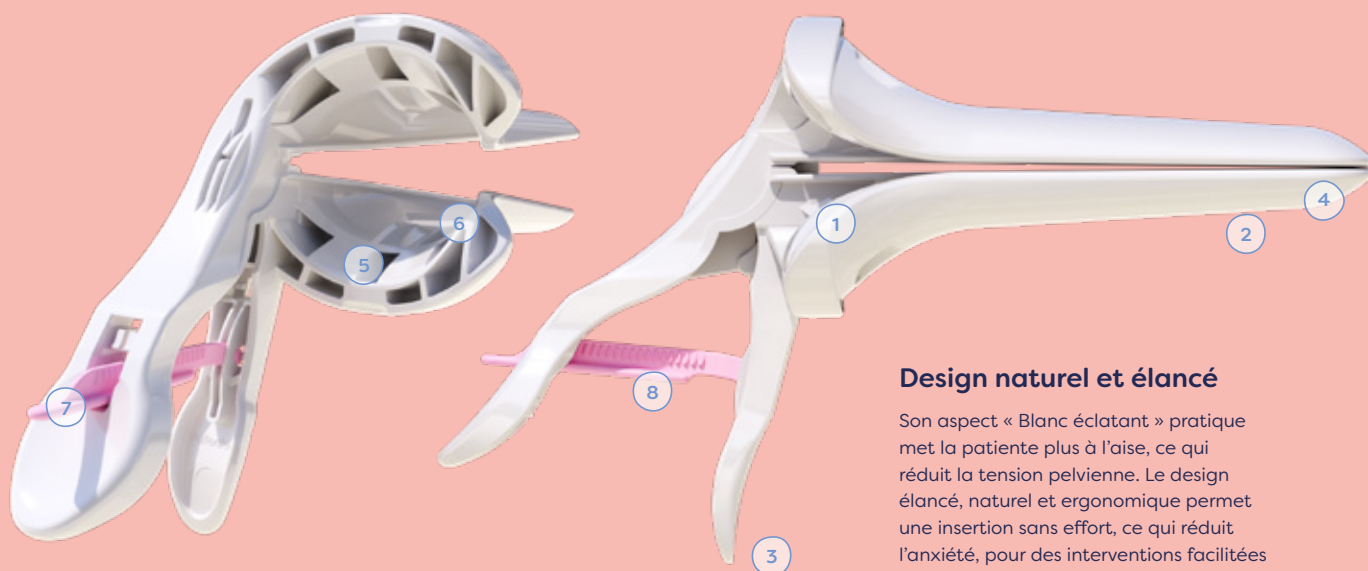

Design naturel et élancé

Son aspect « Blanc éclatant » pratique met la patiente plus à l'aise, ce qui réduit la tension pelvienne. Le design élancé, naturel et ergonomique permet une insertion sans effort, ce qui réduit l'anxiété, pour des interventions facilitées et plus rapides.

L'optimisation d'un spéculum

1. Espace anti-pincement

En raison d'un espace important entre les valves, elles ne se touchent pas lors de la fermeture.

2. Moins d'égouttage résiduel

Les bords repliés vers l'intérieur retiennent les fluides ou les écoulements, ce qui implique moins de nettoyage, une hygiène améliorée, des procédures plus rapides.

3. Poignée inclinée vers l'arrière

La poignée inclinée à 105° vers l'arrière permet une plus grande liberté de mouvement, une plus grande plage d'accès et une insertion plus profonde. Les changements de taille sont moins fréquents et les contacts involontaires avec la patiente sont évités.

4. Bords lisses et arrondis

Les risques de traumatismes tissulaires ou de saignements dus à des angles aigus sont révolus. Notre conception unique englobe des bords arrondis et lisses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui améliore considérablement le confort de la patiente.

5. Surface réfléchissante

La surface blanche réfléchissante dirige davantage de lumière externe vers l'extrémité du spéculum que celle des spéculums transparents ou métalliques. Aucune source de lumière interne n'est nécessaire.

6. Ouverture 30% plus large


que les spéculums les plus utilisés, ce qui offre une meilleure vision et permet une manipulation plus facile des instruments.

7. Intervention sans cliquetis

Verrouillage et déverrouillage faciles d'une seule main, sans agitation, ni cliquetis, ni autres bruits pouvant provoquer une crispation indésirable de la patiente.

8. Utilisation facile d'une seule main et risque de blocage inexistant

Conçu pour être utilisé d'une seule main, le spéculum se verrouille et se déverrouille facilement. Le dispositif de verrouillage est doté d'un mécanisme de sécurité qui bloque les valves si une force trop importante est appliquée.

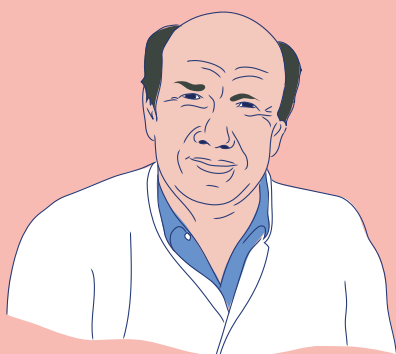

« Il s'agit du meilleur spéculum disponible à ce jour. Confortable pour la patiente et pratique pour l'utilisateur, ses performances sont optimales pour toutes les interventions indiquées. »

Prof. Dr. M. H. Emanuel,
Gynécologue au Centre medical universitaire (UMC) d'Utrecht et professeur invité au Centre hospitalier universitaire de Gand.

Le SPX Open

Extraction des fumées (en option)




La buse conique permet de raccorder facilement tous les tubes d'aspiration de fumée standard et assure une connexion fiable.



Soutien du col de l'utérus renforcé

Les bords repliés vers l'intérieur brevetés, combinés aux surfaces d'appui plates à l'extrémité des valves, permettent de mieux soulever et positionner le col de l'utérus.

Le modèle avec ouverture latérale comporte deux tailles : Medium et Wide. Elles sont disponibles dans les teintes appréciées « Blanc éclatant » (blanc) et « Cristallin » (transparent). Le modèle permettant l'évacuation de la fumée est disponible en Medium et Wide « Blanc éclatant ».

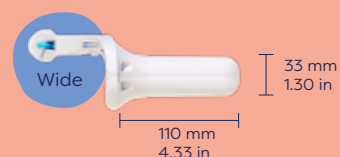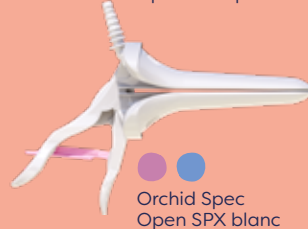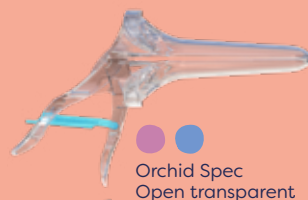

Choix d'un spéculum blanc ou transparent ?

Notre spéculum blanc

Réduction des erreurs de diagnostic

Lors d'un diagnostic effectué à l'aide d'un spéculum « transparent » la vision est déformée en raison de la dépression tissulaire locale et de la décoloration des tissus qui en résulte.

Examen amélioré

La surface blanche permet un examen plus rapide et plus précis de la couleur de l'écoulement.

Confort accru pour la patiente

Le blanc est mieux perçu par les patientes en termes de qualité, d'hygiène et de confort. La durée et la qualité d'une intervention sont meilleures lorsque la patiente est moins anxieuse.

95 % de nos clients le préfèrent

Toutefois, nous vendons aussi des spéculums transparents.

Notre spéculum transparent

La version transparente d'Orchid Spec offre un avantage visible en cas d'accès en présence de pathologies plus sérieuses, lors d'hémorragies ou pour l'examen des sutures, notamment après une hystérectomie.



« Ce speculum est le plus pratique que nous n'ayons jamais eu. Il permet une manipulation optimale, son fonctionnement est fiable, de plus il est lisse et esthétique. C'est celui que les patientes préfèrent. »

Theresa Freeman-Wang,
Médecin spécialisé en gynécologie, The Portland Hospital.

Actuellement, le Bio
est composé de
100%
de canne à sucre

100%
neutre en carbone
d'ici à 2025

**Émissions
nettes
négatives**
d'ici à 2030

Avec Orchid Spec, notre ambition est de rendre les interventions par voie vaginale aussi faciles que possible pour les femmes comme pour les gynécologues du monde entier, tout en aidant Mère Nature. Actuellement, Orchid Spec est le choix le plus écologique. Notre objectif est de devenir neutres en CO₂ d'ici à 2025 et d'atteindre des émissions nettes négatives d'ici à 2030.


Tous nos produits sont de conception néerlandaise et fabriqués au Pays-Bas dans des installations de pointe afin de garantir une gestion optimale des ressources naturelles et une réduction des déchets.



Le Standard
Notre spéculum
écologique standard



Le Bio
Fabriqué à partir
de 100% de
canne à sucre

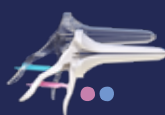

L'Open
Avec ouverture
latérale



Le SPX
Avec système
d'extraction des
fumées



Le SPX Open
Avec ouverture latérale
et système d'extraction
des fumées

A better speculum, a better practice, a better world



Pour toute information ou demande, veuillez prendre contact :
www.orchid-spec.com
enquiry@brideamedical.com

Les produits Orchid Spec sont brevetés et font l'objet d'un dépôt de modèle. Orchid Spec et Bridea Medical sont des marques déposées de Bridea Medical aux Pays-Bas. © 2024 Bridea Medical.